




UA.TR.120

Інструкція із застосування спрей назальний «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ»

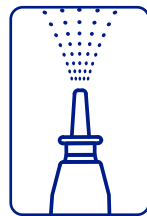

30 мл (ml)

Склад.

Діючі речовини: морська сіль – 0,7%, екстракт алое – 0,16%, екстракт календули – 0,16%.

Допоміжні речовини: вода, бензоат натрію, лимонна кислота, D-пантенол, фурацилін, β-каротин.

Опис.

Однорідна рідина від світло-жовтого до жовтого кольору, без сторонніх включень та домішок.

Форма випуску.

Спрей у флаконі полімерному місткістю 30 мл (ml). Не менше ніж 220 доз.

Властивості.

Дія спрею назального «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ» зумовлена властивостями компонентів, що входять до його складу.

Основна передбачувана дія спрею назального «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ» в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів.

Ізотонічний розчин морської солі сприяє підтримці нормального фізіологічного стану слизової оболонки порожнини носа, знімає набряк слизової, покращує відтік із пазух за рахунок природних фізіологічних процесів. Покращує функцію миготливого епітелію, який посилює захисні функції слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух від попадання хвороботворних бактерій і вірусів.

β-каротин використовується як антиоксидант.

Екстракт календули надає протизапальну, протимікробну і ранозагоювальну дію за рахунок посилення антиоксидантних захисних механізмів. Знімає подразнення та заспокоює слизові оболонки.

Екстракт алое має антибактеріальний та протизапальний ефект. Регулює кислотно-лужний баланс слизових оболонок. Містить вітаміни, мінерали, ферменти і незамінні амінокислоти, за рахунок чого працює як біогенний стимулятор.

D-пантенол пов'язує вміст вологи в слизовій оболонці носа і таким чином оптимально підтримується ефект морської води. Під час знаходження в організмі перетворюється на пантотенову кислоту (вітамін B₅), яка сприяє регенерації і загоєнню, а також сприяє активізації клітин слизової.

Фурацилін включено до складу в якості допоміжної речовини з метою попередження мікробної деградації виробу, підтримки кількості мікроорганізмів на низькому безпечному рівні.

Спрей назальний «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ» застосовується:

- для догляду за слизовою оболонкою пазух носа при гнійно-запальних змінах в порожнині носа для відновлення і захисту фізіологічних функцій слизової оболонки;
- для профілактики інфекцій порожнини носа, у тому числі і грипу;
- особами, котрі страждають проблемами носового дихання, сухістю слизової оболонки носа, наявністю в носі скориночок (кондиціоновані та опалювальні приміщення), курцями, водіями автотранспорту, людьми, що працюють у гарячих і заплиених цехах, з метою відновлення фізіологічних функцій слизової оболонки носа.

Спосіб застосування.

Для відновлення функції слизової оболонки носа **при гострих та хронічних порушеннях носового дихання** – 4-6 разів на добу по 1-2 впорскування у кожний носовий хід.

Для профілактики інфекцій – 4-6 разів на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід.

Для розм'якшення та видалення носових виділень використовувати 2-3 рази на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід, доки скупчення носових виділень, що відклялись у носовому проході, не будуть розм'якшені та видалені.

Особливості застосування.

Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.

Спрей назальний «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ» не впливає на швидкість психомоторних реакцій.

Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним флаконом кільком особам.

Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуально підвищеною чутливістю до його компонентів.

Термін придатності.

Дивитися на упаковці. Після відкриття флакона засіб рекомендується використати протягом 6 тижнів.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від +5 °C до +25 °C в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник.

ТОВ «Георг Біосистеми».

Вул. Вокзальна, буд. 3, смт Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська обл., 26555, Україна.

Адреса виробництва.

Вул. Дорожна, 64Б, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51905, Україна.

Тел.: 0 800 501 161. **E-mail:** contact@georgbio.com

www.georgbio.com

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НАВЕДЕНИХ НА МАРКУВАННІ:

	Використати до
	Номер партії
	Виробник
	Дата виготовлення
	Обмеження температури
	Інструкція із використання
	Знак відповідності технічним регламентам та Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності
	Оберігати від сонячного світла

Для запобігання підробок в оригінальну упаковку засобу, на додаток до інструкції із застосування, вкладено листок-вкладку з унікальним кодом.

Сторона 1	Сторона 2
	AA 00 00 00 00 00

Дата випуску: 31.07.2024



Instructions for use nasal spray "CHISTONOS SPRAY"



30 ml

Components.

Active components: sea salt – 0.7%, aloe extract – 0.16%, calendula extract – 0.16%.

Auxiliary components: water, sodium benzoate, citric acid, D-panthenol, furacilin, β-carotene.

Description.

A homogeneous liquid from light yellow to yellow in color, without foreign inclusions and impurities.

Form of manufacture.

Spray in a polymer bottle with a capacity of 30 ml. Not less than 220 doses.

Properties.

Action of "CHISTONOS SPRAY" nasal spray is determined by properties of the components included in its composition.

The main intended effect of "CHISTONOS SPRAY" nasal spray in human body is not achieved by pharmacological, immunological or metabolic means.

Isotonic solution of sea salt facilitates the normal physiological state of the nasal mucous membrane, reduces mucosal swelling, improves sinus drainage due to natural physiological processes. It improves the ciliate epithelium function, which strengthens protection functions of the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses against penetration of pathogenic bacteria and viruses.

β-carotene is used as an antioxidant.

Calendula extract provides anti-inflammatory, antimicrobial and wound-healing effects due to the enhancement of antioxidant defense mechanisms. It releases irritation and soothes the mucous membranes.

Aloe extract has an antibacterial and anti-inflammatory effect. It regulates the acid-alkaline balance of mucous membranes. It contains vitamins, minerals, enzymes and essential amino acids due to which it works as a biogenic stimulant.

D-panthenol binds the moisture content in the nasal mucosa and thus the sea water effect is optimally maintained. During its stay in the body, it turns into pantothenic acid (vitamin B5), which promotes regeneration and healing, and also promotes the activation of mucosa cells.

Furacilin is included in the composition as an auxiliary substance in order to prevent microbial degradation of the product, to maintain the number of microorganisms at a low and safe level.

"CHISTONOS SPRAY" nasal spray is used:

- for the care of the mucous membrane of the nasal sinuses in case of purulent-inflammatory changes in the nasal cavity restore and protect the physiological functions of the mucous membrane;
- for prevention of infections of the nasal cavity, including influenza;
- by persons suffering from nasal breathing problems, dryness of the nasal mucosa, presence of crusts in the nose (air-conditioned and heated premises), smokers, motor vehicle drivers, people working in hot and dusty workshops, in order to restore the physiological functions of the nasal mucosa.

Method of application.

To restore the functions of the nasal mucosa in acute and chronic disorders of nasal breathing – 4-6 times per day, 1-2 injections into each nasal passage.

For prevention of infections – 4-6 times per day, 2 injections into each nasal passage.

To soften and remove nasal secretions, use 2-3 times per day by means of 2 injections in each nasal passage, until accumulations of nasal secretions deposited in the nasal passage are softened and removed.

Features of application.

Usage by children is allowed only in the presence of adults.

"CHISTONOS SPRAY" nasal spray does not affect the speed of psychomotor actions.

In order to prevent spread of infection, one bottle should not be used by several people.

This product must not be used by people with individual hypersensitivity to its components.

Expiration date.

See on the packaging. After opening the bottle, it is recommended to use the product within 6 weeks.

Storage conditions.

Store at a temperature from +5 °C to +25 °C in a place protected from light and inaccessible to children.

Do not use after expiration of the date indicated at the package.

Manufacturer.

"Georg BioSystems" LLC.

3, Vokzalna str., Pobuzske village, Holovanivsk district, Kirovohrad region, 26555, Ukraine.

Address of manufacture.

64B, Dorozhna str., city of Kamianske, Dnipropetrovsk region, 51905, Ukraine.

Tel.: 0 800 501 161. **E-mail:** contact@georgbio.com

www.georgbio.com

THE MEANING OF THE SYMBOLS SHOWN ON THE MARKING:

	Use – by date
	Batch code
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Temperature limit
	Consult instructions for use
	Mark of conformity with technical regulations and Identification number of the designated conformity assessment body
	Keep away from sun light

To prevent counterfeiting, the original packaging of the product contains an insert with a unique code in addition to the instructions for use.

Side 1	Side 2
	AA 00 00 00 00 00